




Presentamos el Termómetro Electrónico SureTemp[®] Plus 690

Ahora tomar temperaturas es más fácil, más seguro y más preciso.
Y atender a todos sus pacientes es más cómodo.

WelchAllyn[®]

Advancing Frontline Care™



El SureTemp® Plus 690 –
con la velocidad y la precisión que
usted requiere y la versatilidad que
necesita para utilizarlo con todos
sus pacientes todo el tiempo.

- **Fácil de utilizar, funcionamiento intuitivo**
- **El compartimiento desmontable de la sonda reduce el riesgo de contaminación cruzada**
- **Mayor precisión para lecturas todavía más fiables**
- **Mayor versatilidad para utilizarlo con todos sus pacientes, todo el tiempo**

Cuando decidimos mejorar el SureTemp de Welch Allyn, sabíamos que nos costaría mucho trabajo. Después de todo, cuando desarrollas un termómetro que ayuda a establecer las bases de la rapidez y precisión, las expectativas son muy grandes

¿Cómo lo hicimos? Compruebe usted mismo echando un vistazo al innovador SureTemp Plus 690 - más fácil, más seguro y más preciso que el original, y además desarrollado para soportar el uso constante en entornos que requieren estas características.

Fácil: Pantalla LCD de fácil lectura con iconos intermitentes que comunican de forma clara en cualquier idioma, y un interfaz de usuario intuitivo unido al su diseño ergonómico hacen que el uso del SureTemp Plus 690 sea extremadamente fácil.

Seguro: Se aumenta la seguridad para el paciente gracias a su sonda intercambiable que reduce el riesgo de contaminación cruzada.

Rápido y Preciso: Además de su mejor precisión, el SureTemp Plus 690 es uno de los termómetros más rápidos en el mercado, que ofrece aproximadamente entre 4 y 6 segundos lectura oral, en 10 segundos lectura axilar pediátrica y en 15 segundos lectura axilar adulto.

Versátil: Y para poner el punto final a todo eso, ahora usted puede usar el SureTemp Plus 690 con todos sus pacientes, desde recién nacido hasta adulto - siempre que necesite tomar temperatura oral, axilar o rectal.

Sonda intercambiable con botón para expulsión de la cubierta de la sonda

Compartimento desmontable de la sonda para una fácil limpieza

Cómodo compartimento para almacenamiento de 25 cubiertas de sonda

Pantalla LCD grande y fácil de leer

Botón C/F para intercambiar entre grados Fahrenheit y Celsius


Botón "Recall" para visualizar la última temperatura tomada

Diseño ergonómico con agarres recubiertos de goma



Indicador de duración de la batería

Icono y palabras seleccionables por el usuario para identificar el modo del termómetro

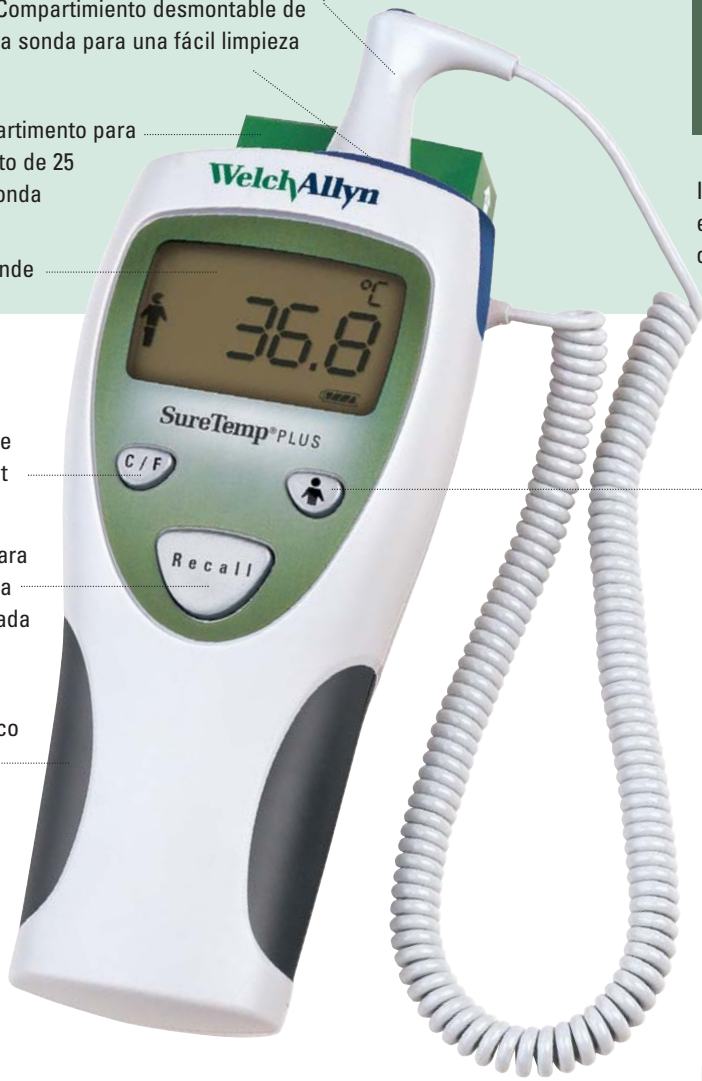

Botón de selección de modo para seleccionar la temperatura oral, axilar pediátrica o axilar adulta

El soporte opcional para pared tiene espacio para 50 cubiertas de sonda adicionales



El alojamiento de sonda y la sonda rectal intercambiables reducen el riesgo de contaminación cruzada

El SureTemp® Plus 690

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

El SureTemp® Plus 690 –
estableciendo el estándar
de atención aún más alto



Especificaciones del SureTemp® Plus 690

Precisión de calibración	±0,1 °C (Modo Monitor)
Tiempo para predicción de temperatura:	
Oral	Aproximadamente 4-6 seg.
Axilar adulto (18 años y mayores)	Aproximadamente 12-15 seg.
Axilar pediátrica (17 años y menores) ..	Aproximadamente 10-13 seg.
Rectal	Aproximadamente 10-13 seg.
Dimensiones de la unidad	215 mm x 81 mm x 62 mm
Peso	357 gramos
Intervalo de temperatura ambiente	10 °C – 40,0 °C
Intervalo de temperatura del paciente	26,7 °C – 43,3 °C
Fuente de energía.....	(3) baterías AA de 1,5 V CC
Duración de las baterías	Aprox. 6000 mediciones de temperatura
Garantía	garantía limitada de 2 años para el instrumento, garantía limitada de 1 año para la sonda y garantía limitada de 90 días para el alojamiento de sonda

Información para pedidos

Termómetros

01690-410	Termómetro electrónico SureTemp Plus (modelo 690), sonda oral con alojamiento de sonda oral, garantía limitada de 2 años
01690-401	Termómetro electrónico SureTemp Plus (modelo 690), sonda rectal con alojamiento de sonda rectal, garantía limitada de 2 años
01690-500	Termómetro electrónico SureTemp Plus (modelo 690), uno por habitación, montaje para pared, 2,74 m sonda oral con alojamiento de sonda oral, garantía limitada de 2 años
01690-501	Termómetro electrónico SureTemp Plus (modelo 690), uno por habitación, montaje para pared, 2,74 m sonda rectal con alojamiento de sonda rectal, garantía limitada de 2 años

Accesorios

21326-0000	Soporte para pared
21330-0000	Soporte para el alojamiento de sonda y la sonda de repuesto
06138-0000	Llave de calibración, 690/692
02892-000	Kit de alojamiento de sonda y sonda rectal 1,22 m
02892-100	Kit de alojamiento de sonda y sonda rectal 2,74 m
02893-000	Kit de alojamiento de sonda y sonda oral 1,22 m
02893-100	Kit de alojamiento de sonda y sonda oral 2,74 m
02891-0000	Alojamiento de sonda sonda, azul
02891-1000	Alojamiento de sonda sonda, rojo
08273-000	Soporte para el termómetro con soporte para el alojamiento de sonda y la sonda de repuesto
21333-0000	Abrazadera, actualización del soporte M600 con soporte para el alojamiento de sonda y la sonda de repuesto
98024-0000	Ampliación de garantía M690

Cubiertas de repuesto

05031-101	Caja con 1.000 cubiertas para sonda
------------------	-------------------------------------

Llame a Welch Allyn para pedir el SureTemp® Plus 690

Welch Allyn Iberia
General Varela 35,
Planta 2ª, oficina 10-11,
28020 Madrid, España,
Tel: +34 91 2990376
Fax: +34 91 4252679
www.welchallyn.es

4341 State Street Road, PO Box 220,
Skaneateles Falls, NY 13153-0220, USA
Tel: 800 535 6663 - Fax: 315 685 3361
www.welchallyn.com

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™